


НАБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОДЫ И ЗЕМЛИ






Руководство по эксплуатации

Важная информация для родителей

земля

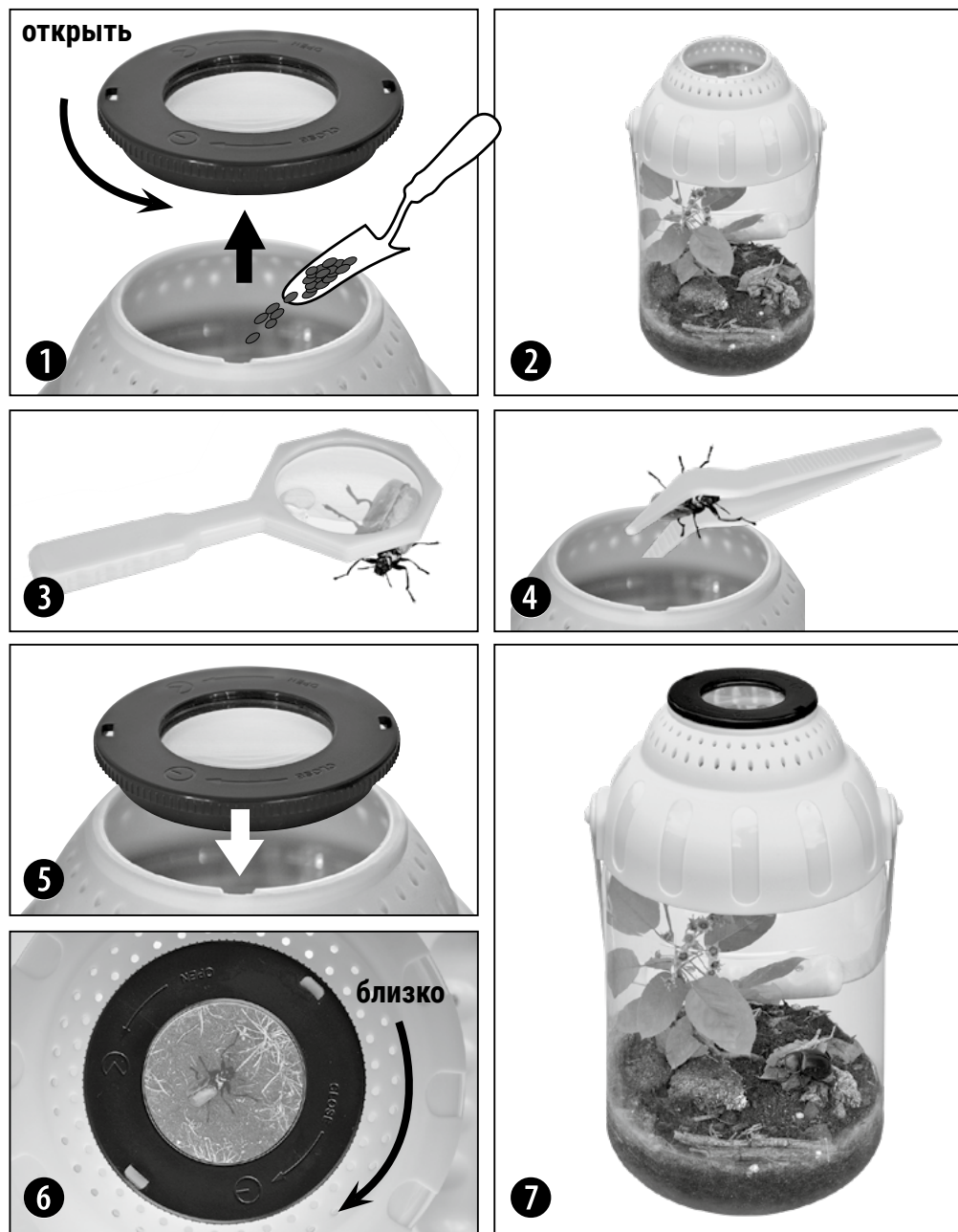

ВОДЫ

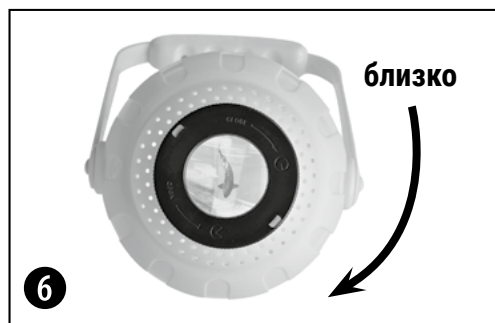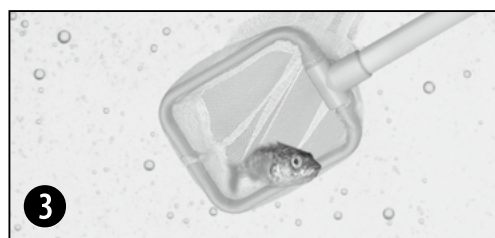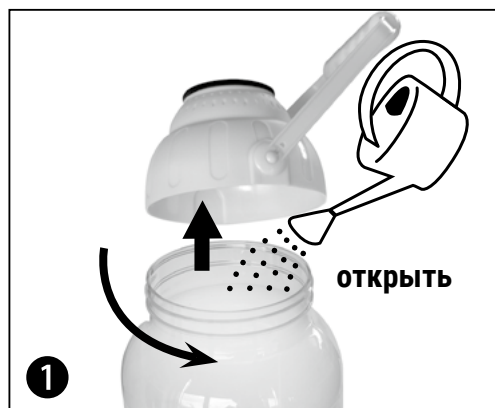



Общие предупреждения

- **ОПАСНОСТЬ травмирования!** Ни в коем случае не смотрите через это устройство прямо на солнце или в направлении солнца. Опасность ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ!
- **ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!** Не оставляйте устройство – в особенности линзы – под прямыми солнечными лучами! Из-за фокусировки солнечных лучей может возникнуть пожар!
- **ОПАСНОСТЬ повреждения материала!** Никогда не разбирайте устройство. При возникновении неисправностей обратитесь к дилеру. Он свяжется с нашим сервисным центром и при необходимости отправит устройство в ремонт.
- Не подвергайте устройство воздействию температур выше 60 °С.

Увлекательные исследования:

Насекомые:

Сделайте террариум, поместив на дно пластикового контейнера немного почвы и растений. С помощью пинцета аккуратно посадите туда насекомых, которых поймали во дворе. Наблюдайте за ними с близкого расстояния. По окончании наблюдений осторожно выпустите насекомых.

Насекомые превосходят по количеству любые другие существа на Земле. В мире более полутора миллионов видов представителей фауны, и насекомые составляют около одного миллиона из них. Некоторые специалисты считают, что еще не открыто в 30 раз больше видов насекомых.

Рыбы:

Заполнив данный контейнер водой, вы сможете использовать его для наблюдения выловленных рыб. Следите за тем, как рыбы дышат жабрами. Жабры состоят из большого количества тонких пластинок, заполненных кровеносными сосудами. Когда вода проходит через жабры, молекулы кислорода попадают в кровь и разносятся по всему телу. Вы заметите, что рыбы дышат тем активнее, чем быстрее плывут. Совсем так же, как дышим мы, когда быстро двигаемся.

УКАЗАНИЯ по чистке

- Линзы (окуляры и объектив) следует очищать только мягкой нетканой салфеткой (например, микрофиброй). Не давите слишком сильно – можно поцарапать линзу.

УТИЛИЗАЦИЯ



Утилизируйте упаковку как предписано законом. При утилизации устройства соблюдайте действующие законодательные нормы. Информацию по правильной утилизации можно получить в коммунальной службе утилизации или в отделе по защите окружающей среды.

Гарантия и продление гарантийного срока

Гарантийный срок составляет два года со дня покупки. Сохраняйте кассовый чек как подтверждение покупки. Для продления гарантии еще на 3 года зарегистрируйтесь на веб-сайте и заполните анкету: www.bresser.de/warranty. Регистрацию необходимо пройти в течение трех месяцев со дня покупки (дня, указанного на чеке). Если вы зарегистрируетесь позже, гарантийный срок не будет продлен.

При обнаружении неисправности изделия обратитесь сначала в нашу сервисную службу; не следует отправлять нам изделие без предварительной консультации по телефону. Обычно мы можем организовать доставку изделия от вас и обратно, а многие проблемы можно решить по телефону. Если неисправность возникла после окончания гарантийного срока или не покрывается условиями гарантии, мы бесплатно оценим стоимость ремонта.

Сервисная служба онлайн: +49 (0) 2872-8074-210

При возврате изделия:

убедитесь, что изделие правильно и тщательно упаковано в оригинальную упаковку – это предотвратит повреждения изделия во время транспортировки. Приложите чек (или его копию) и краткое описание неисправности. Данная гарантия не ограничивает ваши законные права.

Ваш дилер:..... Артикул №:.....

Описание неисправности:

Имя: Телефон:

Улица: Дата покупки:

Индекс / Город: Подпись:



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

НАБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОДЫ И ЗЕМЛ



National Geographic supports
vital work in conservation, research,
exploration, and education.

Visit our website:

www.nationalgeographic.com

© 2013 National Geographic Society
NATIONAL GEOGRAPHIC and Yellow Border Design
are trademarks of the National Geographic Society,
used under license. All rights reserved.



Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
www.bresser.de · info@bresser.de