

Digiale klinische thermometer

INstructiehandleiding

Art. Nr. 981060100000

Fabrikant:
Kjpmj Health Co., Ltd.
No.55, Wu Kong Sh Rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City 24890, Taiwan
https://www.polygreen.com

EC REP Verlegenwoordig in de Europese Gemeenschap:
POLYGREEN GERMANY GmbH
Ruhlsdorfer Straße 95
14532 Stahnsdorf, Duitsland
www.bresser.de
info@bresser.de

Importeur:
Bresser GmbH,
Gutenbergstraße 2,
46414 Rheda, Duitsland
www.bresser.de
info@bresser.de

Lees voor gebruik zorgvuldig door

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT EN BEDOELD GEBRUIK

Deze digitale thermometer is bedoeld om de lichaamstemperatuur van kinderen en volwassenen te meten; hij heeft een digitaal display en wordt gebruikt in een huishoudelijke omgeving.



CONTRA-INDICATIES

- Plaats de thermometer sonde niet in littekenweefsel of weefsel aangedast door huidziekten.
- Plaats de thermometer sonde niet op de huid die is blootgesteld aan direct zonlicht, open haard hitte, koude compressie/hepatie, luchtstromen van airconditioners, enz.
- Niet oraal gebruiken.** 1. Zuggelieden en kinderen. 2. Beweetstede of mond-aanmond contact. 3. Ontsteking of operatie aan de mond. 4. Aanhoudend frequent hoesten. 5. Zwakke of oude patiënten die hun mond niet goed kunnen sluiten. 6. Patiënt met epileptische aanvallen. 7. Na het drinken van warme of koude vloeistoffen.
- Niet axillair gebruiken.** 1. Huidziekte.
- Niet rectaal gebruiken:** 1. Patiënten met operatie in het rectum of perineale gebied. 2. Ziekte of ontsteking van het rectum 3. Diarree ofambeien.

KENMERKEN

- Gemakkelijk leesaan digitaal LCD. 2. Snelle meting, de minimale meettijd van oral en rectaal is ongeveer 10 seconden, axillair is ongeveer 30 seconden correct gebruik. 3. Geheugenweergave voor de laatste gemeten temperatuur. 4. Compact, nauwkeurig en duurzaam apparaat. 5. Zeer gevoelig voor het verkiegen van de thermometer. 6. Als de thermometer per ongeluk aan blijft staan na het meten van de temperatuur, schakelt hij automatisch uit na 3 minuten. 7. Kleine, lichte, behaarde. 8. Wanneer de indicatie van een lege batterij verschijnt, vervang de oude batterij door een nieuwe. 9. De eenheid is waterbestendig.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

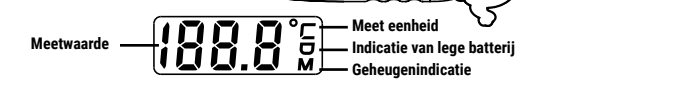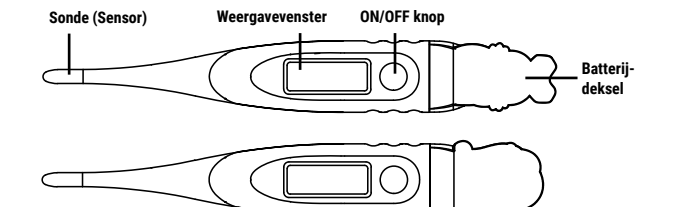

SPECIFICATIES

Meetbereik	32,0~43,9°C
Resolutie	0,1°C
Nauwkeurigheid	35,5~42,0°C ±0,1°C; Overige ±0,2°C
Geheugen	Laatste geheugen
Batterij (inbegrepen)	1x LR41 Batterij
Batterijduur	Meer dan 5000 metingen
Werkomstandigheden	16,0~40,0°C, R.V. van 15~95% niet-condenserend
Opslagconditie	-20,0~50,0°C, R.V. van 15~95% niet-condenserend
Afmeting	Muis: 150,9 mm x 20,9 mm x 12,0 mm Olifant: 146,8 mm x 29,2 mm x 12,0 mm
Gewicht	Muis: Ongeveer 13,8 g inclusief batterij Olifant: Ongeveer 14,2 g inclusief batterij
Certificering	ISO 13485
Productclassificatie	Type BF-apparaat

UITLEG VAN SYMBOLEN

	Geheugenindicatie
	Volg de gebruiksaanwijzing
	Fabrikant
	Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap.
	Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen
	MMYY: Nummer van lotten samengesteld uit maand(M) en jaar(J) van fabricage
	De CE-markering met het registratienummer van de aangemelde instantie. Dit geeft de naleving van de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG aan.
	Type BF: Bescherming tegen elektrische schokken, type toegestaan bed, I-chaam zwevend.
	02:00 Bescherm tegen vaste vreemde voorwerpen van 12,5mm en groter. 02:00 Water dat druppelt wanneer gekanteld op 15°. Bezuinigingen geclassificeerd volgens de mate van bescherming tegen binnenstromen van water en stofdeeltjes (IPN12) zoals beschreven in IEC 60529. ME-apparaat of onderdeel daarvan gemarkeerd met IP-missiecode volgens IEC 60529 volgens classificatie in 6.3 (Tabel D.3, code 2).
	AEEA (Richtlijn Afdelende Elektrische en Elektronische Apparatuur, 2012/19/EU)
	Het apparaat kan worden teruggezonden naar de fabrikant voor recycling of juiste verwijdering na de verwachte levensduur. Als alternatief moet het apparaat worden verwijderd in overeenstemming met de nationale wetgeving.
	ROHS-symbool: Dit geeft de naleving van de Richtlijn Beperking van Gevaarlijke Stoffen aan.
	Geen PHT
	REACH-symbool: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen (REACH) is een verordening van de Europese Unie.
	Meetlicte is oraal, axillair en rectaal.

VOORZORG

- Koek de sonde niet. Bereid de eenheid in plaats daarvan door deze af te vegen met een droge doek en desinfecteer de eenheid met isopropylalcohol. Zie de reinigingsinstructies van de eenheid.
- Laat de thermometer niet vallen of de stekker niet bloot aan zware schokken.
- Bijt of knijp de sonde en de batterij niet samen.
- De thermometer niet in contact komen met een vloeistof of enige verdamer van chemische oplosmiddelen.
- Plaats een gebruikte thermometer in de eenheid of in het opbergdoosje.
- Bewaar de eenheid niet in direct zonlicht, bij hoge temperaturen, in hoge luchtvochtigheid of stof. De prestaties kunnen verminderen.
- De prestaties van de thermometer als de eenheid onregelmatig werkt of als het display defect is.
- Laat de thermometer niet vallen of de stekker niet bloot aan zware schokken.
- Buiten bereik van onbeheerde kinderen houden. Laat kinderen niet met de eenheid spelen. DE TEMPERATUUR MOET ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENEN WORDEN GEETEN.
- Onderdelen kunnen schadelijk zijn als ze worden ingeslikt. Neem onmiddellijk contact op met een arts als dit gebeurt.

- Reinig de sonde van de thermometer voor opslag.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen behalve om de batterijen te vervangen.
- Gebruik niet als het display defect is of het onregelmatig werkt.
- Als de thermometer is opgeslagen bij temperaturen onder het vriespunt, laat de thermometer dan natuurlijk op kamertemperatuur komen voordat u deze gebruikt.
- Plaats dit apparaat niet in de vaatwasser.
- De prestaties van de thermometer kunnen afnemen als: Bediening of opslag buiten de aangegeven temperatuurbereik (vochtigheidsbereiken of als de temperatuur van de patiënt lager is dan de omgevingtemperatuur).
- Voordat u het gebruikt, wordt aanbevolen om minstens dertig minuten voor het nemen van een meting niet te drinken, roken of oefenen in niet te dragen of lopen tijdens het meten, dit kan een onjuiste meting veroorzaken.
- Het gebruik van dit apparaat in de buurt van draagbare telefoons, magnetrons of andere apparaten met sterke elektromagnetische velden kan storingen veroorzaken. Houd tijdens het gebruik minimaal 3 meter afstand van draagbare apparaten.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, versijnt het symbool in het displayvenster, wat betekent dat het tijd is om de batterijen te vervangen.
- Oral gemeten temperaturen zijn vaak 0,5°C lager dan de werkelijke lichaamstemperatuur.
- De meting is te referentie, als u zich ziek of ongemakkelijk voelt, raadpleeg dan een arts.
- De thermometer is een directe mond-temperatuur. De meetlicte is de referentie lichaamsschilte en de meetlicte is oraal, axillair en rectaal.
- Het apparaat wordt niet-steriel verkocht en is een herbruikbaar apparaat zonder speciale houdbaarheidsproblemen.
- Een zuggelief of baby is niet geschikt voor orale metingen.
- Geen orale metingen voor bewustelose of mond-aanmondende patiënten.
- Geen orale metingen voor patiënten met ontsteking of chirurgische wond in de mond.
- Geen orale metingen voor patiënten die constant hoesten.
- Zwakke of oude mensen die hun mond niet goed kunnen sluiten, zijn niet geschikt voor orale metingen.
- Geen orale metingen voor patiënten met epileptische aanvallen.
- Geen okselmetingen bij huidaandoeningen.
- Patiënten met een operatie in het rectum of perineale gebied zijn niet geschikt voor rectale metingen.
- Ziekten of ontstekingen van het rectum zijn niet geschikt voor rectale metingen.
- Mensen met diarree ofambeien zijn niet geschikt voor rectale metingen.

VERVANGING VAN DE BATTERIJ

- Wanneer het symbool versijnt, moet de batterij worden vervangen.
- Draai de schroef los en trek vervolgens het batterijdeksel en de rubberen plug in de aangegeven richting eruit. Gebruik een puntig voorwerp zoals een tandenstoker of geïsoleerde schaar om de oude batterij los te trekken.
- Vernijd het gebruik van scherp metalen voorwerpen bij deze handeling.
- Plaats een nieuwe 1,5V knoopbatterij (LR41) of gelijkwaardig in de kamer met de negatieve (-) zijde naar boven en de positieve (+) zijde naar beneden.
- Plaats de rubberen plug, het batterijdeksel en de schroef terug. Draai de schroef stevig vast.

Digiale klinische thermometer

INstructiehandleiding

Art. Nr. 981060100000

Fabrikant:
Kjpmj Health Co., Ltd.
No.55, Wu Kong Sh Rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City 24890, Taiwan
https://www.polygreen.com

EC REP Verlegenwoordig in de Europese Gemeenschap:
POLYGREEN GERMANY GmbH
Ruhlsdorfer Straße 95
14532 Stahnsdorf, Duitsland
www.bresser.de
info@bresser.de

Importeur:
Bresser GmbH,
Gutenbergstraße 2,
46414 Rheda, Duitsland
www.bresser.de
info@bresser.de

Lees voor gebruik zorgvuldig door

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT EN BEDOELD GEBRUIK

Deze digitale thermometer is bedoeld om de lichaamstemperatuur van kinderen en volwassenen te meten; hij heeft een digitaal display en wordt gebruikt in een huishoudelijke omgeving.

- Bewaar de batterij en gooi de oude batterij zorgvuldig weg, buiten het bereik van jonge kinderen. Het inslikken van de batterij kan fataal zijn. Als de batterij wordt ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met een ziekenhuis om deze te laten verwijderen. Gooi de batterij niet in het vuur. Het kan ontploffen.
- Voor de verwijdering van de batterij, overneem de nationale regelgeving.
- De thermometer bevat de batterij die enkele metingen kan uitvoeren en mogelijk niet zowel metingen biedt als een nieuwe batterij.
- Als u de thermometer niet regelmatig gebruikt, zorg er dan voor dat u de batterij na elk gebruik verwijdt om lekken van de batterij of mogelijke schade te voorkomen.

HOE TE GEBRUIKEN

- Desinfecteer de sonde met isopropylalcohol voor gebruik.
- Druk op en laat de ON/OFF knop los, het display geeft weer ter bevestiging dat de eenheid correct functioneert.
- Dan toont het display 1°C met "C" knipperend.
- Plaats de sonde in de juiste positie.
- Zodra het graadteken "C" stopt met knippen, is de meting voltooid en wordt de temperatuur weergegeven. Er klinkt ook een alarmsignaal gedurende ongeveer 8 seconden nadat "C" stopt met knippen.

- De eenheid schakelt automatisch uit na 3 minuten (ongeveer). 7. Na het drinken van warme of koude vloeistoffen, is het echter het beste om de ON/OFF knop te drukken om uit te schakelen zodra de temperatuur is aangegeven.

Speciale kenmerken

Geheugen voor de laatste temperatuur: Wanneer de eenheid is uitgeschakeld, houdt u de ON/OFF knop ongeveer 2 seconden ingedrukt, de laatste geheugenweergave wordt getoond. Laat de ON/OFF knop los, de eenheid is klaar voor meting.

Voor modellen met koortsaalarm: Als de temperatuur hoger is dan 37,5°C, zal het koortsaal (een snel piepgeluid) dat ongeveer 8 seconden continu klinkt) afgaan wanneer de maximale temperatuur is geregistreerd. Ook blijft het resultaat knippen totdat de thermometer wordt uitgeschakeld.

NOTITIE: Desinfecteer de thermometer altijd voor gebruik.

NOTITIE: De knop of eten voor gebruik kan de meting beïnvloeden; orale meting moet 30 minuten na drinken of eten worden uitgevoerd.

NOTITIE: In stap 4 kunt u een hygienische plastic sondehoes op de sensorpijplaatjes om kruisbesmetting en verontreiniging te helpen voorkomen. Het gebruik van de sondehoes kan resulteren in een afwijking van 0,1°C van de werkelijke temperatuur. Gooi gebruikte sondehoes weg en bewaar de eenheid op een veilige plaats.

NOTITIE: Temperatuurmetingen variëren van meet tot persoon en van tijd tot tijd, vind uw normale temperatuur niet op of veranderden. Als u metingen vergelijkt tussen twee thermometers, is het mogelijk om verschillen metingen te hebben, zelfs als beide binnen de nauwkeurigheidsvereiste liggen.

BETROUWBAARE METHODE OM TEMPERATUUR TE METEN

HET NEMEN VAN LICHAAMSTEMPERATUREN: Verandering in lichaamstemperatuur is een van de belangrijkste indicatoren van ziekte. Het is belangrijk dat nauwkeurige temperatuur worden gemeten. Hoevel stopt het apparaat op dezelfde manier wordt gebruikt als de glazen thermometer, is het belangrijk dat de eenvoudige gebruiksaanwijzing van dit apparaat nauwkeurig wordt gevolgd en dat de persoon die de temperatuur meet de lichaamstemperatuur begrijpt.



LICHAAMSTEMPERATUUR:

De lichaamstemperatuur van een persoon is meestal enkele tienden tot een hele graad lager in de ochtend dan in de late namiddag. Daarom, als uw temperatuur 's ochtends 36,0°C is, kan het 's middags 36,0°C of hoger zijn en nog steeds normaal zijn. Om te bepalen wat u uw normale lichaamstemperatuur is, moet u v u temperatuur zowel vroeg in de ochtend als in de late namiddag gedurende meerdere dagen meten.

Kinderen hebben hetzelfde normale temperatuurbereik als volwassenen. Een koorts voor zowel kinderen als volwassenen wordt doorgaans gedefinieerd als een temperatuur boven 37,5°C. Definitie: 146,8 mm x 29,2 mm x 12,0 mm. Top: Circa 13,8 g inclusief batterij. Elfant: Circa 14,2 g inclusief batterij.

Plaats sondeput

ORAL AXILLAIR: Plaats de sonde goed onder de tong van de patiënt. Instrueer de patiënt om de mond gesloten te houden terwijl de thermometer de meting uitvoert. Een normale temperatuur volgens deze methode wordt meestal beschouwd tussen 36,0°C en 37,5°C.

RECTAL AXILLAIR: Als je arts je aanraadt om de rectale temperatuur te meten, kun je een sondekapje gebruiken. Plaats de thermometer in de sondehoes. Smeer de sondehoes in met een in water oplosbare gel voor gemakkelijke invoer, gebruik geen vaseline, dit kan een onjuiste meting veroorzaken. Voer de punt van de sonde niet meer dan 1,5 centimeter in het rectum in. STOP als u enige weerstand ondervindt. De meeteenheid bevindt zich op de punt van de sonde en het is niet nodig om de sonde diep in het rectum te steken. Over het algemeen is de rectale temperatuur ongeveer 0,3°C tot 0,6°C hoger dan de orale temperatuur.

NOTITIE: Aangezien vaseline een olie oplosbare gel is, zal het een lage temperatuurmeting veroorzaken. Als het nodig is om vaseline te gebruiken, wordt het aanbevolen om de meting te verlaten ongeacht het piepgeluid en continue te wachten gedurende ongeveer 2-3 minuten.

AXILLAIR BEGRIP: Vee de oksel schoon met een droge handdoek. Plaats de sonde in de oksel van de patiënt en houd de arm van de patiënt stevig tegen het lichaam. Over het algemeen is de axillaire temperatuur ongeveer 0,5°C tot 1,0°C lager dan de orale temperatuur. Houd er rekening mee dat het betere meetresultaten van de axillaire temperatuur te bereiken, een minimale meettijd van 2-3 minuten wordt aanbevolen, ongeacht het piepgeluid.

NOTITIE: Kinderen moeten gedurende de gehele meting door een volwassene worden begeleid. Na gebruik moet de digitale thermometer op een veilige plaats worden bewaard, buiten het bereik van jonge kinderen. Als u temperaturen vergelijkt tussen twee thermometers, is het mogelijk om twee verschillende metingen te hebben, zelfs als beide thermometers binnen hun nauwkeurigheidstolerantie vallen. Verschil in hoe u elke meting uitvoert en de tolerantiebereik van de thermometer kunnen een variabiliteit van bijna 0,1°C verklaren.

RECHTAL: Als je arts je aanraadt om de rectale temperatuur te meten, kun je een sondekapje gebruiken. Plaats de thermometer in de sondehoes. Smeer de sondehoes in met een in water oplosbare gel voor gemakkelijke invoer, gebruik geen vaseline, dit kan een onjuiste meting veroorzaken. Voer de punt van de sonde niet meer dan 1,5 centimeter in het rectum in. STOP als u enige weerstand ondervindt. De meeteenheid bevindt zich op de punt van de sonde en het is niet nodig om de sonde diep in het rectum te steken. Over het algemeen is de rectale temperatuur ongeveer 0,3°C tot 0,6°C hoger dan de orale temperatuur.

NOTITIE: Aangezien vaseline een olie oplosbare gel is, zal het een lage temperatuurmeting veroorzaken. Als het nodig is om vaseline te gebruiken, wordt het aanbevolen om de meting te verlaten ongeacht het piepgeluid en continue te wachten gedurende ongeveer 2-3 minuten.

AXILLAIR BEGRIP: Vee de oksel schoon met een droge handdoek. Plaats de sonde in de oksel van de patiënt en houd de arm van de patiënt stevig tegen het lichaam. Over het algemeen is de axillaire temperatuur ongeveer 0,5°C tot 1,0°C lager dan de orale temperatuur. Houd er rekening mee dat het betere meetresultaten van de axillaire temperatuur te bereiken, een minimale meettijd van 2-3 minuten wordt aanbevolen, ongeacht het piepgeluid.

NOTITIE: Kinderen moeten gedurende de gehele meting door een volwassene worden begeleid. Na gebruik moet de digitale thermometer op een veilige plaats worden bewaard, buiten het bereik van jonge kinderen. Als u temperaturen vergelijkt tussen twee thermometers, is het mogelijk om twee verschillende metingen te hebben, zelfs als beide thermometers binnen hun nauwkeurigheidstolerantie vallen. Verschil in hoe u elke meting uitvoert en de tolerantiebereik van de thermometer kunnen een variabiliteit van bijna 0,1°C verklaren.

RECHTAL: Als je arts je aanraadt om de rectale temperatuur te meten, kun je een sondekapje gebruiken. Plaats de thermometer in de sondehoes. Smeer de sondehoes in met een in water oplosbare gel voor gemakkelijke invoer, gebruik geen vaseline, dit kan een onjuiste meting veroorzaken. Voer de punt van de sonde niet meer dan 1,5 centimeter in het rectum in. STOP als u enige weerstand ondervindt. De meeteenheid bevindt zich op de punt van de sonde en het is niet nodig om de sonde diep in het rectum te steken. Over het algemeen is de rectale temperatuur ongeveer 0,3°C tot 0,6°C hoger dan de orale temperatuur.

NOTITIE: Aangezien vaseline een olie oplosbare gel is, zal het een lage temperatuurmeting veroorzaken. Als het nodig is om vaseline te gebruiken, wordt het aanbevolen om de meting te verlaten ongeacht het piepgeluid en continue te wachten gedurende ongeveer 2-3 minuten.

AXILLAIR BEGRIP: Vee de oksel schoon met een droge handdoek. Plaats de sonde in de oksel van de patiënt en houd de arm van de patiënt stevig tegen het lichaam. Over het algemeen is de axillaire temperatuur ongeveer 0,5°C tot 1,0°C lager dan de orale temperatuur. Houd er rekening mee dat het betere meetresultaten van de axillaire temperatuur te bereiken, een minimale meettijd van 2-3 minuten wordt aanbevolen, ongeacht het piepgeluid.

NOTITIE: Kinderen moeten gedurende de gehele meting door een volwassene worden begeleid. Na gebruik moet de digitale thermometer op een veilige plaats worden bewaard, buiten het bereik van jonge kinderen. Als u temperaturen vergelijkt tussen twee thermometers, is het mogelijk om twee verschillende metingen te hebben, zelfs als beide thermometers binnen hun nauwkeurigheidstolerantie vallen. Verschil in hoe u elke meting uitvoert en de tolerantiebereik van de thermometer kunnen een variabiliteit van bijna 0,1°C verklaren.

RECHTAL: Als je arts je aanraadt om de rectale temperatuur te meten, kun je een sondekapje gebruiken. Plaats de thermometer in de sondehoes. Smeer de sondehoes in met een in water oplosbare gel voor gemakkelijke invoer, gebruik geen vaseline, dit kan een onjuiste meting veroorzaken. Voer de punt van de sonde niet meer dan 1,5 centimeter in het rectum in. STOP als u enige weerstand ondervindt. De meeteenheid bevindt zich op de punt van de sonde en het is niet nodig om de sonde diep in het rectum te steken. Over het algemeen is de rectale temperatuur ongeveer 0,3°C tot 0,6°C hoger dan de orale temperatuur.

NOTITIE: Aangezien vaseline een olie oplosbare gel is, zal het een lage temperatuurmeting veroorzaken. Als het nodig is om vaseline te gebruiken, wordt het aanbevolen om de meting te verlaten ongeacht het piepgeluid en continue te wachten gedurende ongeveer 2-3 minuten.

AXILLAIR BEGRIP: Vee de oksel schoon met een droge handdoek. Plaats de sonde in de oksel van de patiënt en houd de arm van de patiënt stevig tegen het lichaam. Over het algemeen is de axillaire temperatuur ongeveer 0,5°C tot 1,0°C lager dan de orale temperatuur. Houd er rekening mee dat het betere meetresultaten van de axillaire temperatuur te bereiken, een minimale meettijd van 2-3 minuten wordt aanbevolen, ongeacht het piepgeluid.

NOTITIE: Kinderen moeten gedurende de gehele meting door een volwassene worden begeleid. Na gebruik moet de digitale thermometer op een veilige plaats worden bewaard, buiten het bereik van jonge kinderen. Als u temperaturen vergelijkt tussen twee thermometers, is het mogelijk om twee verschillende metingen te hebben, zelfs als beide thermometers binnen hun nauwkeurigheidstolerantie vallen. Verschil in hoe u elke meting uitvoert en de tolerantiebereik van de thermometer kunnen een variabiliteit van bijna 0,1°C verklaren.

RECHTAL: Als je arts je aanraadt om de rectale temperatuur te meten, kun je een sondekapje gebruiken. Plaats de thermometer in de sondehoes. Smeer de sondehoes in met een in water oplosbare gel voor gemakkelijke invoer, gebruik geen vaseline, dit kan een onjuiste meting veroorzaken. Voer de punt van de sonde niet meer dan 1,5 centimeter in het rectum in. STOP als u enige weerstand ondervindt. De meeteenheid bevindt zich op de punt van de sonde en het is niet nodig om de sonde diep in het rectum te steken. Over het algemeen is de rectale temperatuur ongeveer 0,3°C tot 0,6°C hoger dan de orale temperatuur.

NOTITIE: Aangezien vaseline een olie oplosbare gel is, zal het een lage temperatuurmeting veroorzaken. Als het nodig is om vaseline te gebruiken, wordt het aanbevolen om de meting te verlaten ongeacht het piepgeluid en continue te wachten gedurende ongeveer 2-3 minuten.

AXILLAIR BEGRIP: Vee de oksel schoon met een droge handdoek. Plaats de sonde in de oksel van de patiënt en houd de arm van de patiënt stevig tegen het lichaam. Over het algemeen is de axillaire temperatuur ongeveer 0,5°C tot 1,0°C lager dan de orale temperatuur. Houd er rekening mee dat het betere meetresultaten van de axillaire temperatuur te bereiken, een minimale meettijd van 2-3 minuten wordt aanbevolen, ongeacht het piepgeluid.

NOTITIE: Kinderen moeten gedurende de gehele meting door een volwassene worden begeleid. Na gebruik moet de digitale thermometer op een veilige plaats worden bewaard, buiten het bereik van jonge kinderen. Als u temperaturen vergelijkt tussen twee thermometers, is het mogelijk om twee verschillende metingen te hebben, zelfs als beide thermometers binnen hun nauwkeurigheidstolerantie vallen. Verschil in hoe u elke meting uitvoert en de tolerantiebereik van de thermometer kunnen een variabiliteit van bijna 0,1°C verklaren.

RECHTAL: Als je arts je aanraadt om de rectale temperatuur te meten, kun je een sondekapje gebruiken. Plaats de thermometer in de sondehoes. Smeer de sondehoes in met een in water oplosbare gel voor gemakkelijke invoer, gebruik geen vaseline, dit kan een onjuiste meting veroorzaken. Voer de punt van de sonde niet meer dan 1,5 centimeter in het rectum in. STOP als u enige weerstand ondervindt. De meeteenheid bevindt zich op de punt van de sonde en het is niet nodig om de sonde diep in het rectum te steken. Over het algemeen is de rectale temperatuur ongeveer 0,3°C tot 0,6°C hoger dan de orale temperatuur.

NOTITIE: Aangezien vaseline een olie oplosbare gel is, zal het een lage temperatuurmeting veroorzaken. Als het nodig is om vaseline te gebruiken, wordt het aanbevolen om de meting te verlaten ongeacht het piepgeluid en continue te wachten gedurende ongeveer 2-3 minuten.

AXILLAIR BEGRIP: Vee de oksel schoon met een droge handdoek. Plaats de sonde in de oksel van de patiënt en houd de arm van de patiënt stevig tegen het lichaam. Over het algemeen is de axillaire temperatuur ongeveer 0,5°C tot 1,0°C lager dan de orale temperatuur. Houd er rekening mee dat het betere meetresultaten van de axillaire temperatuur te bereiken, een minimale meettijd van 2-3 minuten wordt aanbevolen, ongeacht het piepgeluid.

NOTITIE: Kinderen moeten gedurende de gehele meting door een volwassene worden begeleid. Na gebruik moet de digitale thermometer op een veilige plaats worden bewaard, buiten het bereik van jonge kinderen. Als u temperaturen vergelijkt tussen twee thermometers, is het mogelijk om twee verschillende metingen te hebben, zelfs als beide thermometers binnen hun nauwkeurigheidstolerantie vallen. Verschil in hoe u elke meting uitvoert en de tolerantiebereik van de thermometer kunnen een variabiliteit van bijna 0,1°C verklaren.

RECHTAL: Als je arts je aanraadt om de rectale temperatuur te meten, kun je een sondekapje gebruiken. Plaats de thermometer in de sondehoes. Smeer de sondehoes in met een in water oplosbare gel voor gemakkelijke invoer, gebruik geen vaseline, dit kan een onjuiste meting veroorzaken. Voer de punt van de sonde niet meer dan 1,5 centimeter in het rectum in. STOP als u enige weerstand ondervindt. De meeteenheid bevindt zich op de punt van de sonde en het is niet nodig om de sonde diep in het rectum te steken. Over het algemeen is de rectale temperatuur ongeveer 0,3°C tot 0,6°C hoger dan de orale temperatuur.

NOTITIE: Aangezien vaseline een olie oplosbare gel is, zal het een lage temperatuurmeting veroorzaken. Als het nodig is om vaseline te gebruiken, wordt het aanbevolen om de meting te verlaten ongeacht het piepgeluid en continue te wachten gedurende ongeveer 2-3 minuten.

AXILLAIR BEGRIP: Vee de oksel schoon met een droge handdoek. Plaats de sonde in de oksel van de patiënt en houd de arm van de patiënt stevig tegen het lichaam. Over het algemeen is de axillaire temperatuur ongeveer 0,5°C tot 1,0°C lager dan de orale temperatuur. Houd er rekening mee dat het betere meetresultaten van de axillaire temperatuur te bereiken, een minimale meettijd van 2-3 minuten wordt aanbevolen, ongeacht het piepgeluid.

NOTITIE: Kinderen moeten gedurende de gehele meting door een volwassene worden begeleid. Na gebruik moet de digitale thermometer op een veilige plaats worden bewaard, buiten het bereik van jonge kinderen. Als u temperaturen vergelijkt tussen twee thermometers, is het mogelijk om twee verschillende metingen te hebben, zelfs als beide thermometers binnen hun nauwkeurigheidstolerantie vallen. Verschil in hoe u elke meting uitvoert en de tolerantiebereik van de thermometer kunnen een variabiliteit van bijna 0,1°C verklaren.

RECHTAL: Als je arts je aanraadt om de rectale temperatuur te meten, kun je een sondekapje gebruiken. Plaats de thermometer in de sondehoes. Smeer de sondehoes in met een in water oplosbare gel voor gemakkelijke invoer, gebruik geen vaseline, dit kan een onjuiste meting veroorzaken. Voer de punt van de sonde niet meer dan 1,5 centimeter in het rectum in. STOP als u enige weerstand ondervindt. De meeteenheid bevindt zich op de punt van de sonde en het is niet nodig om de sonde diep in het rectum te steken. Over het algemeen is de rectale temperatuur ongeveer 0,3°C tot 0,6°C hoger dan de orale temperatuur.

NOTITIE: Aangezien vaseline een olie oplosbare gel is, zal het een lage temperatuurmeting veroorzaken. Als het nodig is om vaseline te gebruiken, wordt het aanbevolen om de meting te verlaten ongeacht het piepgeluid en continue te wachten gedurende ongeveer 2-3 minuten.

AXILLAIR BEGRIP: Vee de oksel schoon met een droge handdoek. Plaats de sonde in de oksel van de patiënt en houd de arm van de patiënt stevig tegen het lichaam. Over het algemeen is de axillaire temperatuur ongeveer 0,5°C tot 1,0°C lager dan de orale temperatuur. Houd er rekening mee dat het betere meetresultaten van de axillaire temperatuur te bereiken, een minimale meettijd van 2-3 minuten wordt aanbevolen, ongeacht het piepgeluid.

NOTITIE: Kinderen moeten gedurende de gehele meting door een volwassene worden begeleid. Na gebruik moet de digitale thermometer op een veilige plaats worden bewaard, buiten het bereik van jonge kinderen. Als u temperaturen vergelijkt tussen twee thermometers, is het mogelijk om twee verschillende metingen te hebben, zelfs als beide thermometers binnen hun nauwkeurigheidstolerantie vallen. Verschil in hoe u elke meting uitvoert en de tolerantiebereik van de thermometer kunnen een variabiliteit van bijna 0,1°C verklaren.

RECHTAL: Als je arts je aanraadt om de rectale temperatuur te meten, kun je een sondekapje gebruiken. Plaats de thermometer in de sondehoes. Smeer de sondehoes in met een in water oplosbare gel voor gemakkelijke invoer, gebruik geen vaseline, dit kan een onjuiste meting veroorzaken. Voer de punt van de sonde niet meer dan 1,5 centimeter in het rectum in. STOP als u enige weerstand ondervindt. De meeteenheid bevindt zich op de punt van de sonde en het is niet nodig om de sonde diep in het rectum te steken. Over het algemeen is de rectale temperatuur ongeveer 0,3°C tot 0,6°C hoger dan de orale temperatuur.

NOTITIE: Aangezien vaseline een olie oplosbare gel is, zal het een lage temperatuurmeting veroorzaken. Als het nodig is om vaseline te gebruiken, wordt het aanbevolen om de meting te verlaten ongeacht het piepgeluid en continue te wachten gedurende ongeveer 2-3 minuten.

AXILLAIR BEGRIP: Vee de oksel schoon met een droge handdoek. Plaats de sonde in de oksel van de patiënt en houd de arm van de patiënt stevig tegen het lichaam. Over het algemeen is de axillaire temperatuur ongeveer 0,5°C tot 1,0°C lager dan de orale temperatuur. Houd er rekening mee dat het betere meetresultaten van de axillaire temperatuur te bereiken, een minimale meettijd van 2-3 minuten wordt aanbevolen, ongeacht het piepgeluid.

NOTITIE: Kinderen moeten gedurende de gehele meting door een volwassene worden begeleid. Na gebruik moet de digitale thermometer op een veilige plaats worden bewaard, buiten het bereik van jonge kinderen. Als u temperaturen vergelijkt tussen twee thermometers, is het mogelijk om twee verschillende metingen te hebben, zelfs als beide thermometers binnen hun nauwkeurigheidstolerantie vallen. Verschil in hoe u elke meting uitvoert en de tolerantiebereik van de thermometer kunnen een variabiliteit van bijna 0,1